

おて画る MAX 操作マニュアル

ユーザ様向け

2017/6/13

はじめに


おて画る MAX の操作概要を記す

- ・ 基本的にはマニュアル無くても直感的に操作できるようになっている。

『おて画る MAX』 の操作概要

操作概要

6 メイン画面の説明

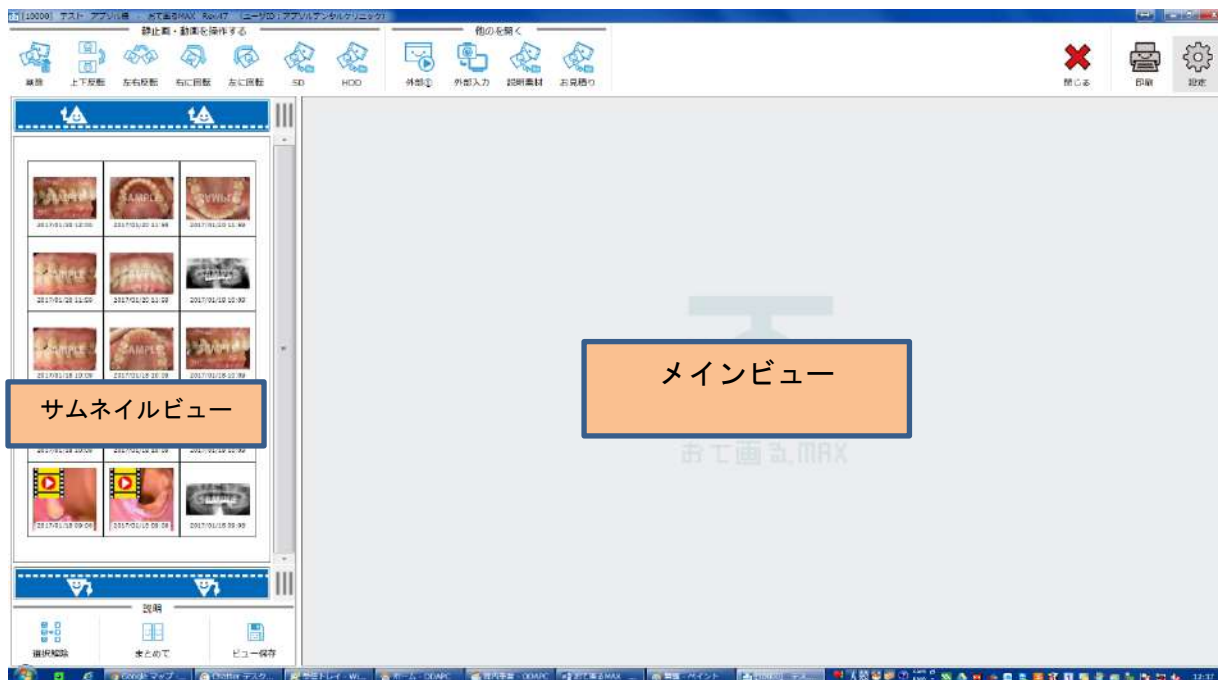

6.1 サムネイルビューには静止画又は動画のサムネイルが並びます。


新しい静止画または動画が上に表示されるようになっています。



6.2 スクロールする際は上下のボタンで移動させます。

上スクロールボタン

下スクロールボタン

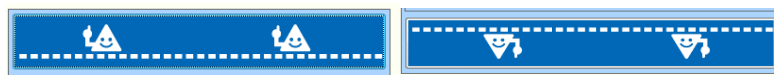


7 起動と終了

7.1 レセコンから『おて画る MAX』用の起動ボタンを押して起動します。


レセコンからのおて画る MAX の起動方法はレセコンメーカーによって異なりますので、詳しくはレセコンメーカーにお問い合わせ願います。

基本的に患者さんを選択して、[おて画る MAX] ボタンを押して起動します。

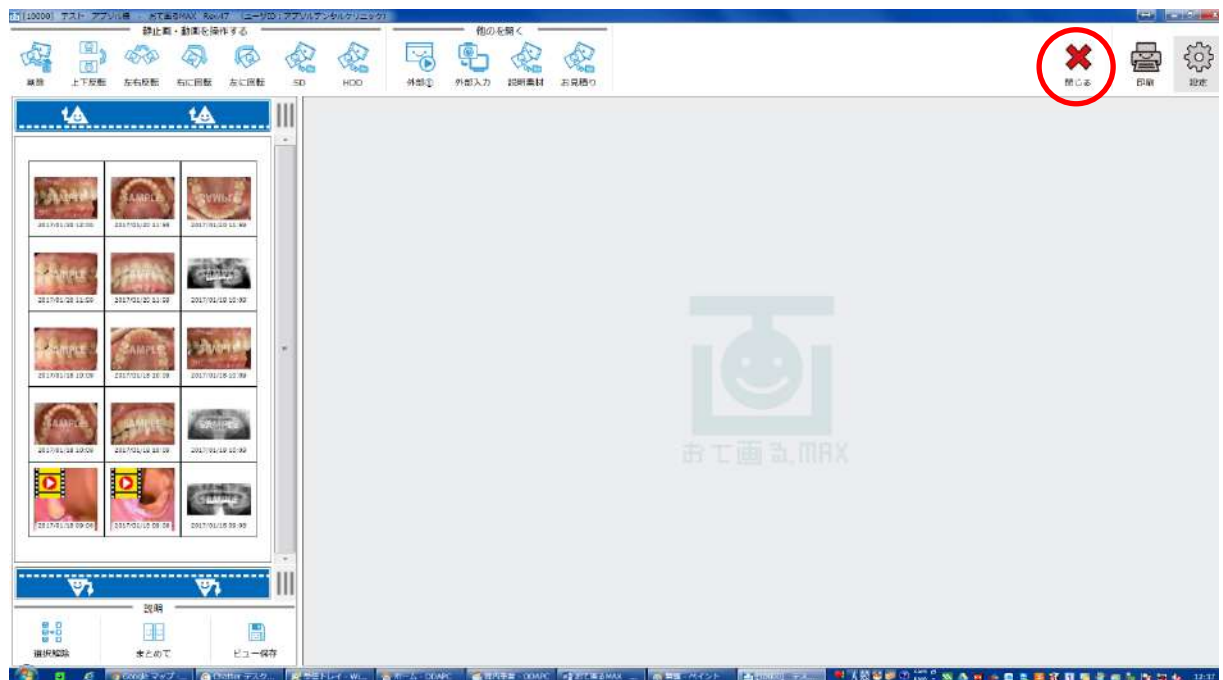

7.2 終了する際は[閉じる]ボタンで終了します。

8 静止画と動画の取り込み

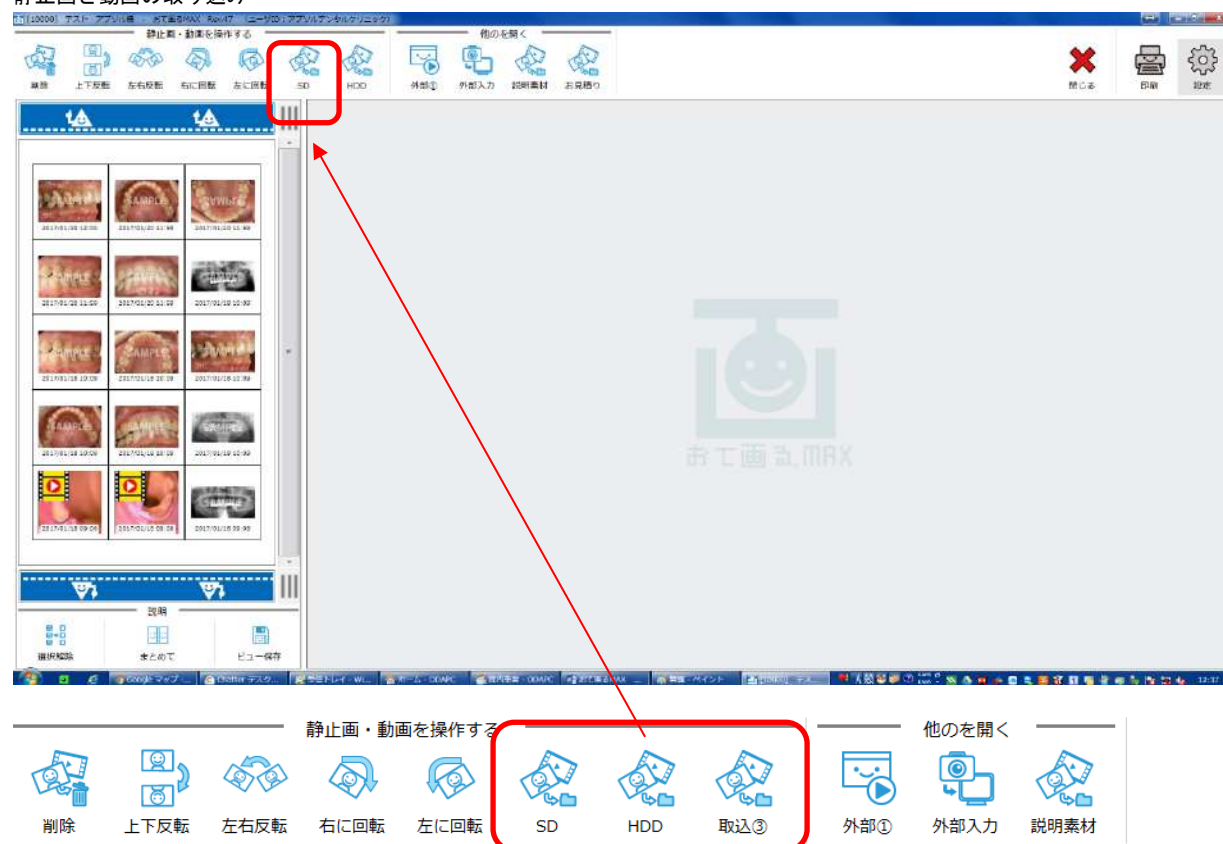


設定するとこのような表示に出来ます。

※最大で3つまで指定できます。よく取り込む名称を販売店に指定してもらいましょう。

※表示は設定ボタンから変更出来ます。

8.1 左側の場所のフォルダをダブルクリックして、静止画と動画のある場所を開きます

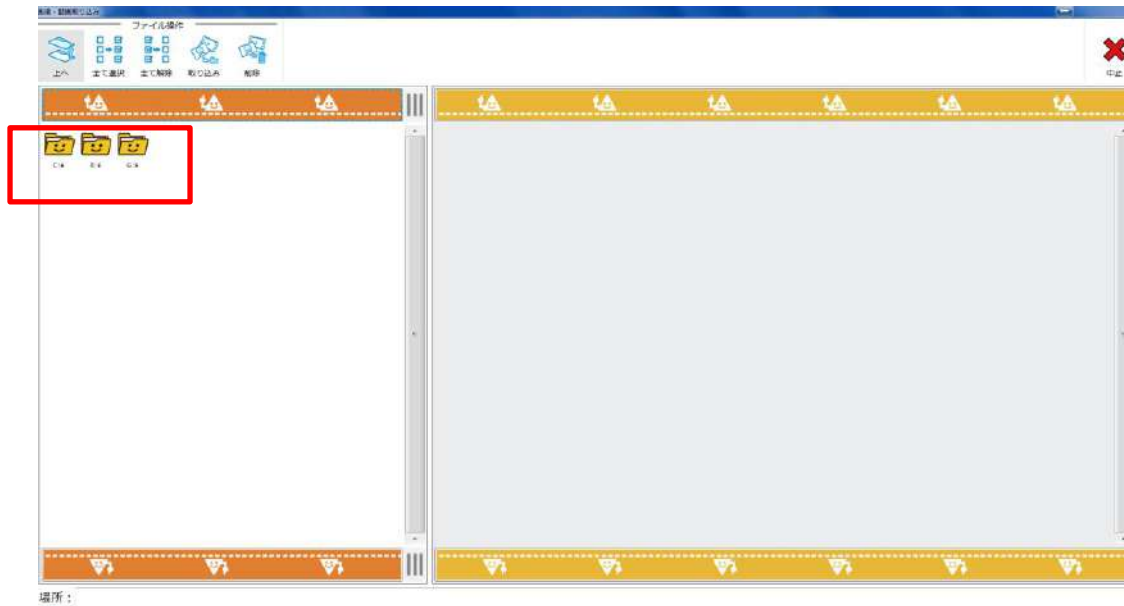

8.2 フォルダの移動で戻る場合は[上へ]ボタンにて移動して下さい。



8.3 取り込みたいサムネイルを選択します。オレンジ色になれば選択されています。

選択を解除する場合はもう1度クリックします。



8.4 [全て選択]ボタンで静止画又は動画を全て選択できます。




8.5 [全て解除]ボタンで、静止画又は動画を全て選択していない状態に戻します。



8.6 選択する静止画又は動画が決まったら[取り込み]ボタンをクリックします。




8.7 選択しているデータを消したい場合は「削除」ボタンをクリックします。

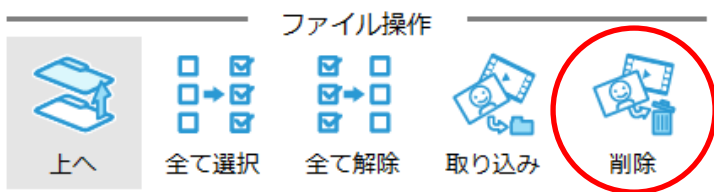

8.7 取り込みを止める場合は、[中止]ボタンをクリックするとメイン画面に戻ります。


9 外部ボタン

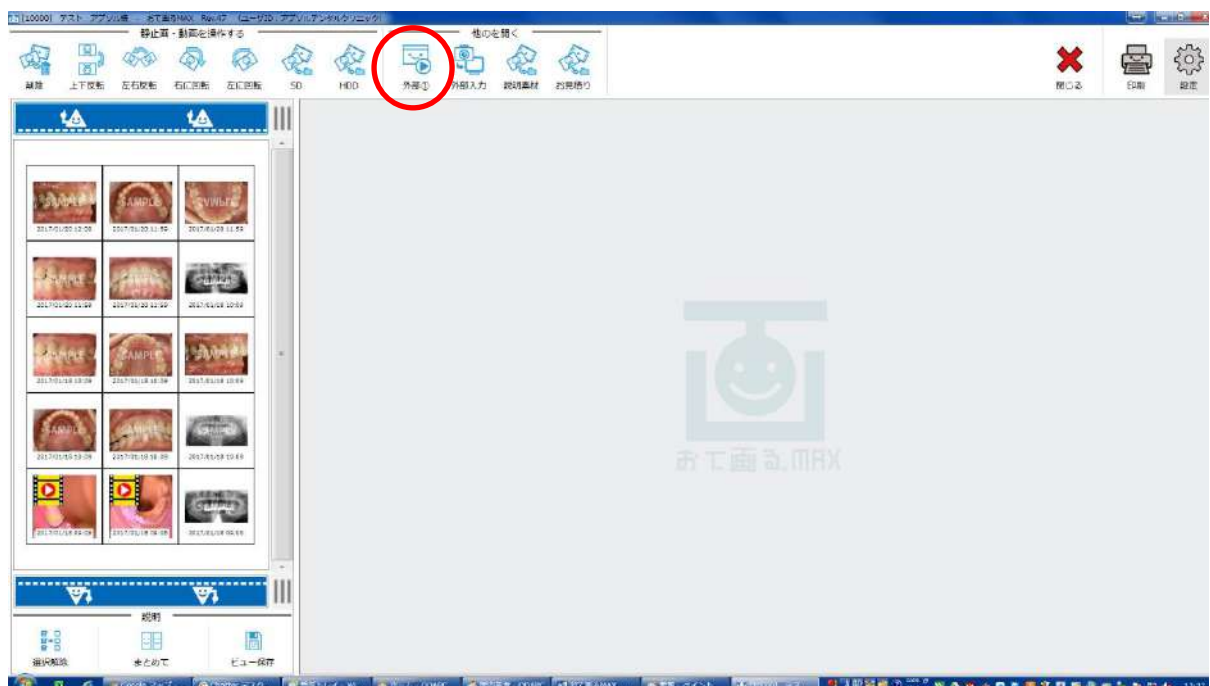

外部ボタンは他のアプリケーションやソフトを開くためのボタンです。

※外部ボタンは最大2個まで設定できます。

10 選択と選択解除

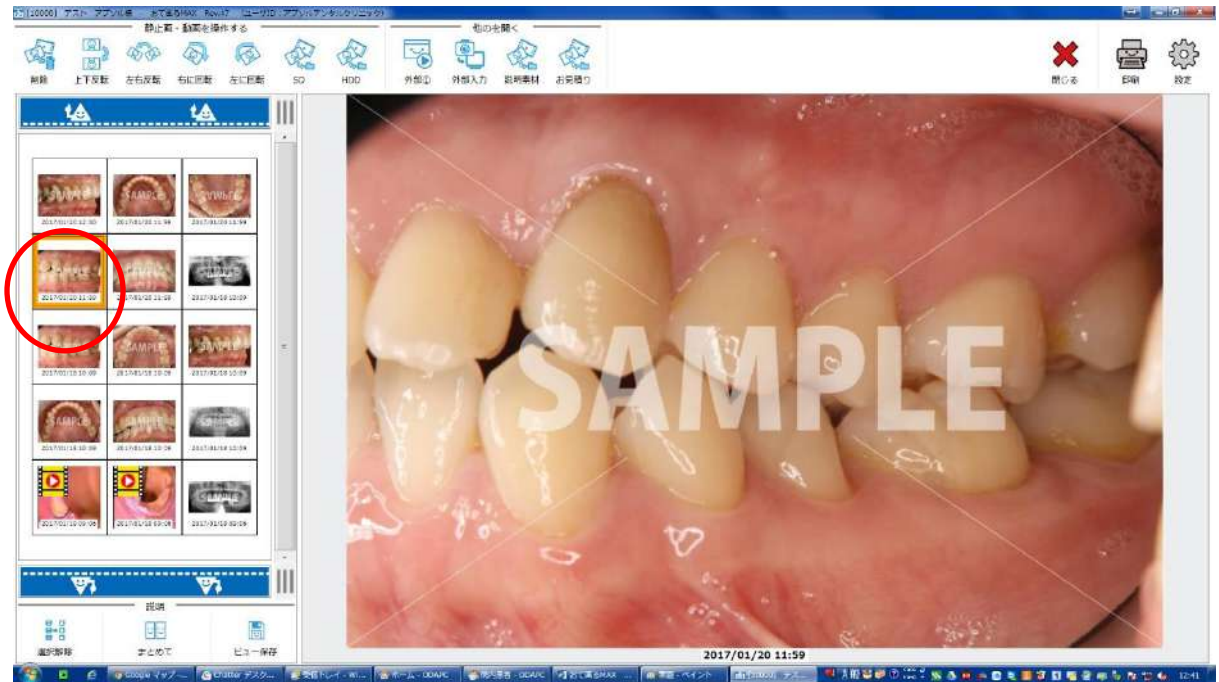

10.1 選択したい静止画又は動画をクリックすると選択されます。選択されるとオレンジ色になります。

選択された静止画又は動画が右側のメインビューに表示されます。

10.2 選択を解除する場合は、静止画又は動画をクリックすると、選択が解除されます。

選択されていたオレンジ色の背景色が無くなります。

10.3 [選択解除]ボタンで、サムネイルで選択されている静止画又は動画を一括で選択解除することができます。



11 印刷する

11.1 [印刷]ボタンをクリックしてメインビューを印刷します。






11.2 どのプリンタから印刷するのかは、印刷ダイアログで選択して下さい。

11.3 最後に使ったプリンタが記憶されますので、次回の印刷時に選択しなおす必要はありません。

11.4 プリンタの設定はインストールされているプリンタドライバの設定になっています。


12 静止画・動画を削除

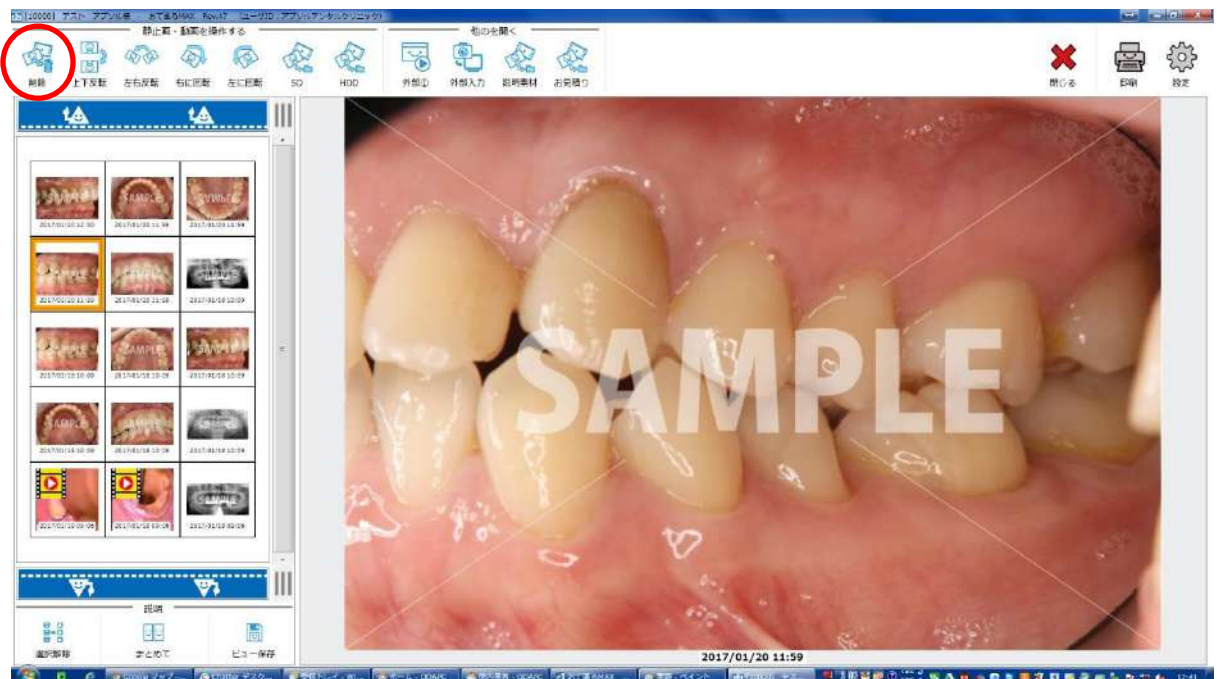

12.1 [削除]ボタンで選択されている静止画・動画を削除します。



12.2 確認メッセージが表示しますので削除する場合は[はい]をクリックします。

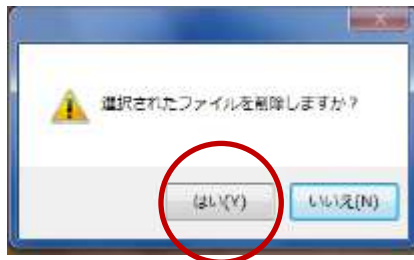

13 ビューを分割表示する

13.1 比較等をした時に選択している静止画又は動画を分割表示します。




13.2 分割したい静止画又は動画を複数選択します。

13.3 [まとめて]ボタンをクリックすると、メインビューが分割されて表示されます。




まとめて


13.4 最大で9つの静止画又は動画を分割表示できます。

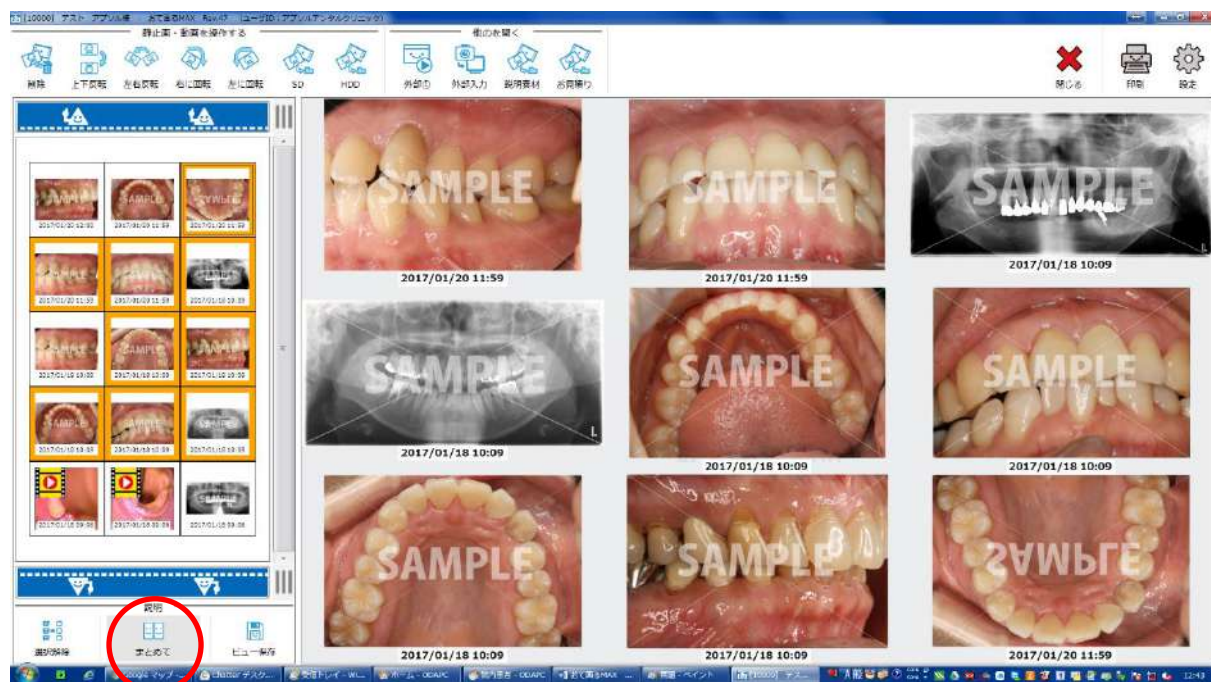


13.5 まとめて表示した画像の移動

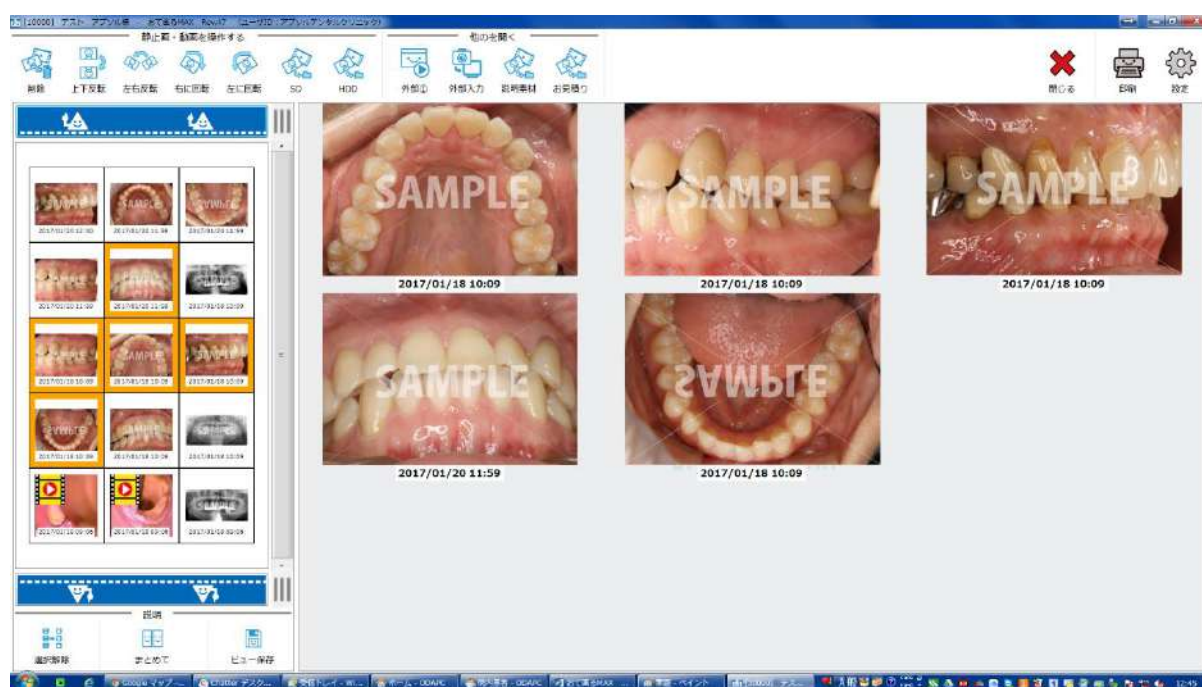


このまま画像を移動したい場所にドラッグします。

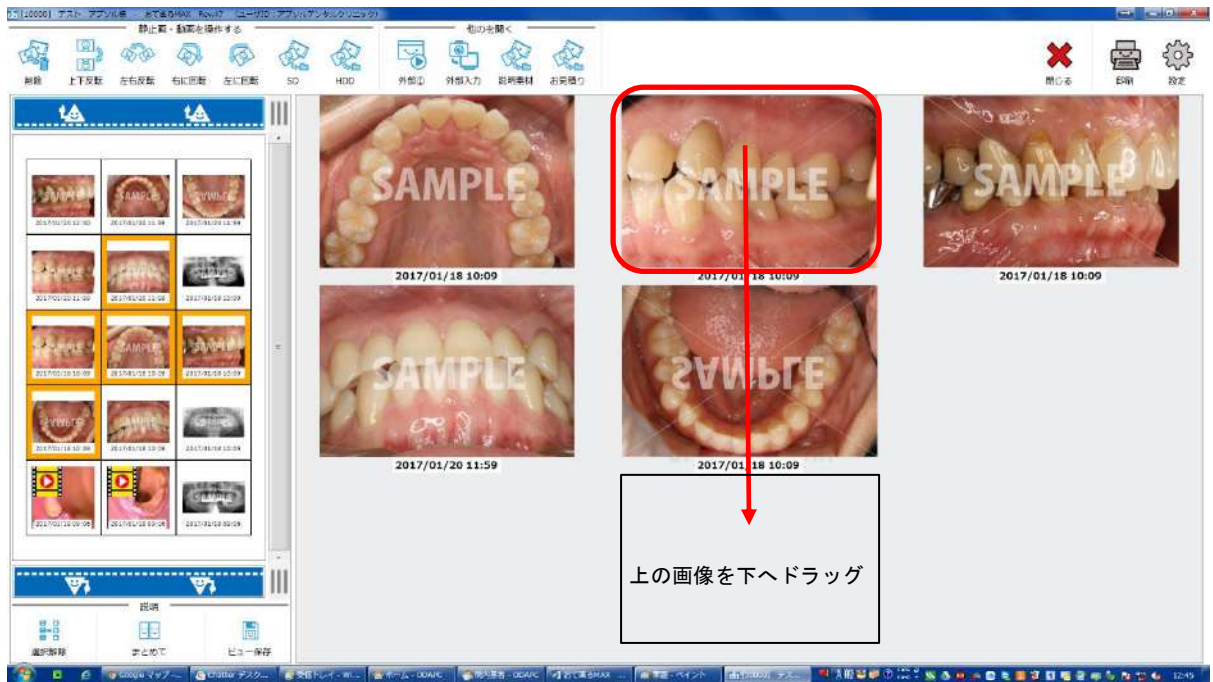

ドラッグした場所に画像が移動します。

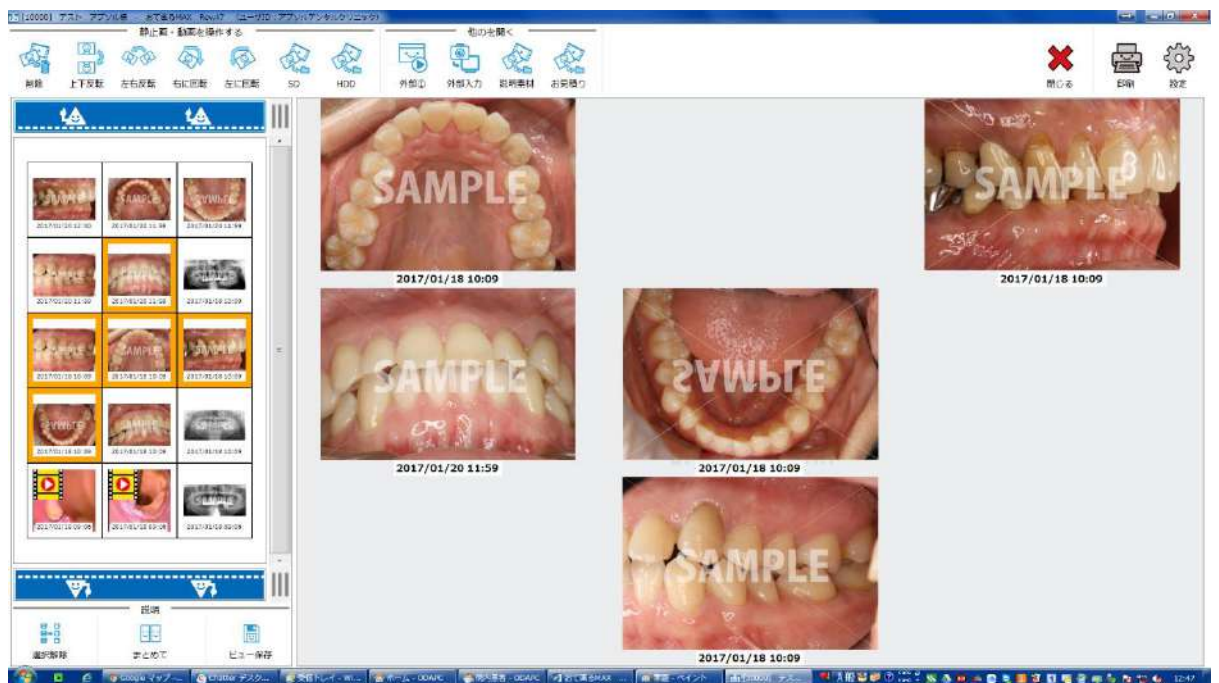

この動作を繰り返し、好きなレイアウトで表示できます。

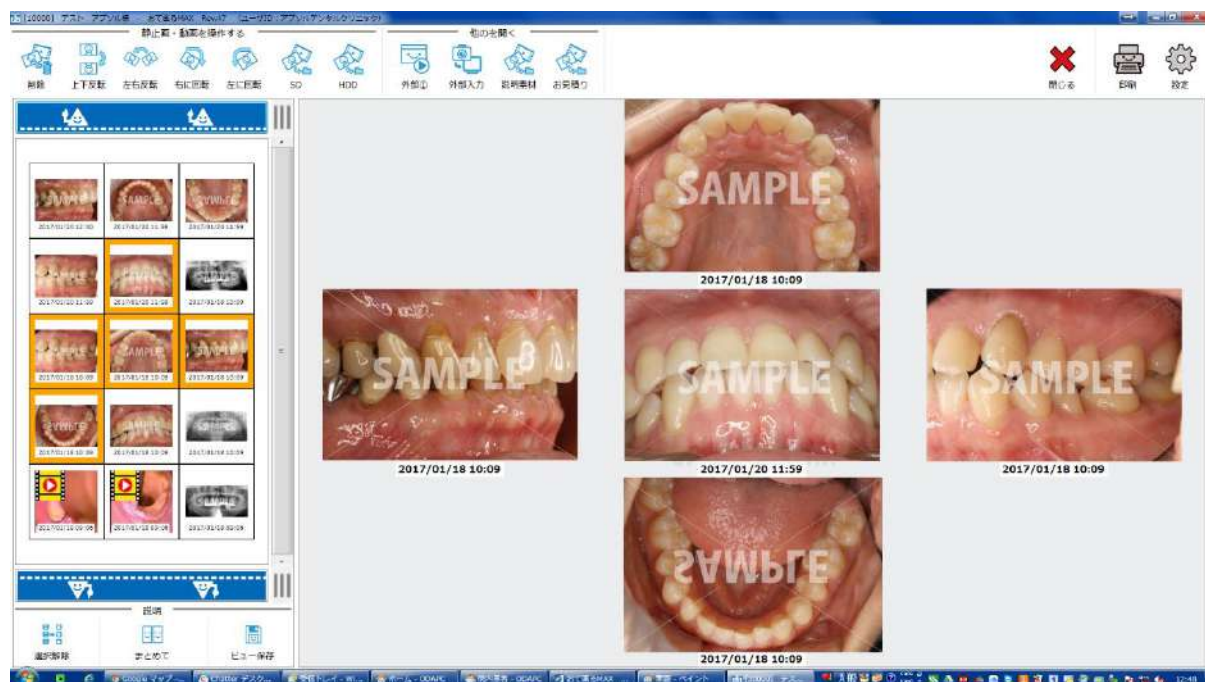


表示のみで説明をしていただくか、必要であれば次に説明する※「ビュー保存」で記録しましょう。

- 13.6 「ビュー保存」ボタンをクリックするとまとめて表示した分割画面が保存されます。




ビュー保存

- 13.7 ビュー保存はメインビューに表示している分割画像を保存することができます。

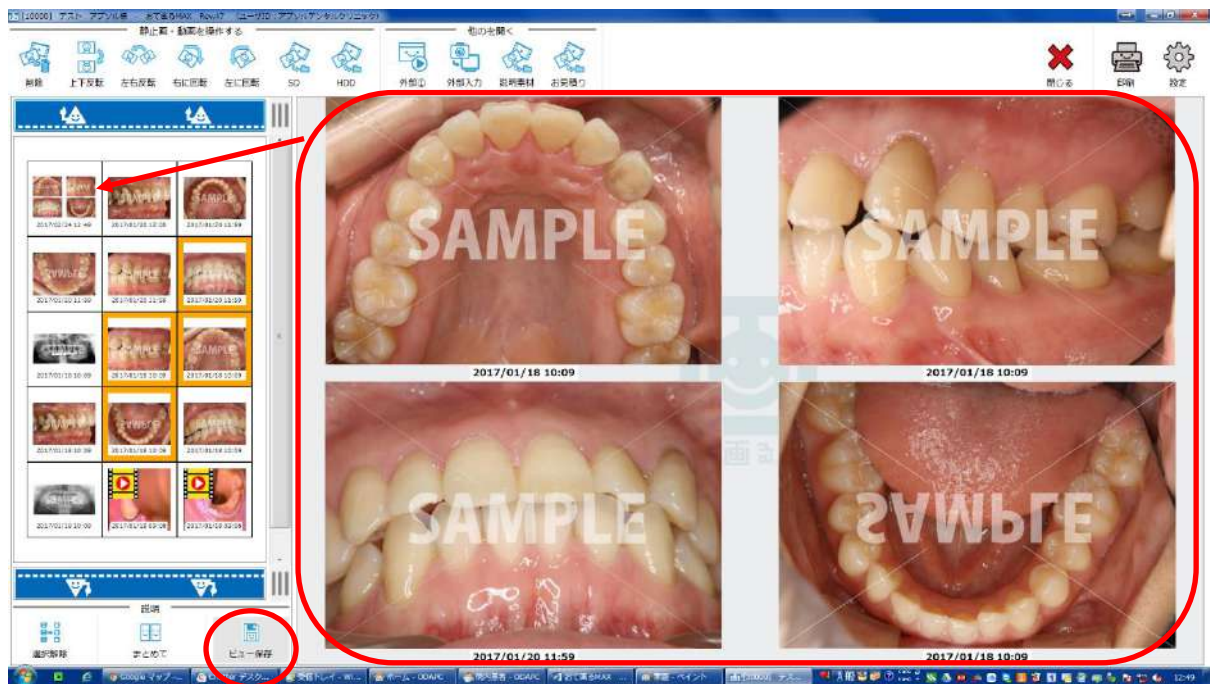

14 お絵描きする

14.1 ビュー画面の静止画をダブルクリックするとお絵かき画面になります。

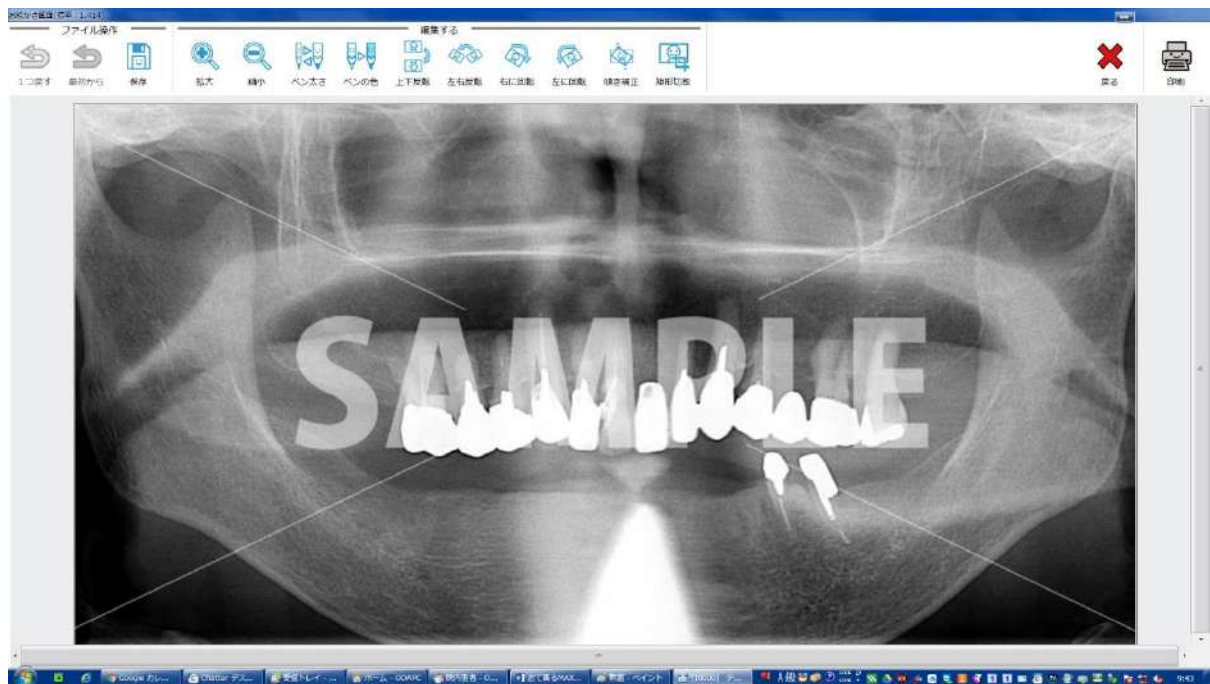

14. 2[ペンの太さ]ボタンでペンの太さを変更します。




14. 3 お好みの太さをクリックして選択します。



14. 4[ペンの色]ボタンでペンの色を変更します。



14.5 お好みの色をクリックして選択します。

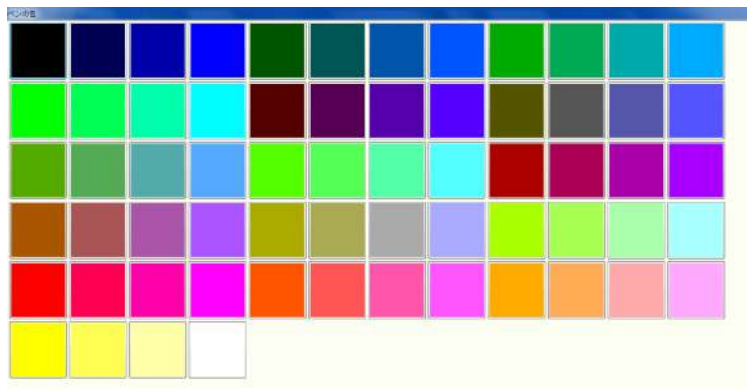

14.6[拡大]ボタンで画像を拡大します。



14.7[縮小]ボタンで画像を縮小します。



14.8[最初から]ボタンでお絵描きする前の状態に戻します。




14.9[1つ戻す]ボタンで1つ前のお絵描きした状態に戻します。



14.10[右 90 度回転]ボタンで静止画を右へ 90 度回転します。



14.11[左 90 度回転] ボタンで静止画を左へ 90 度回転します。

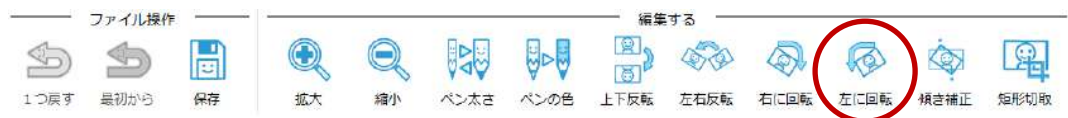

14. 12[左右反転]ボタンで静止画を左右反転します。




14. 13[上下反転] ボタンで静止画を上下反転します。



14. 14[保存] ボタンで画像を保存します。




14. 15「傾き補正」ボタンで画像の角度を調整します。

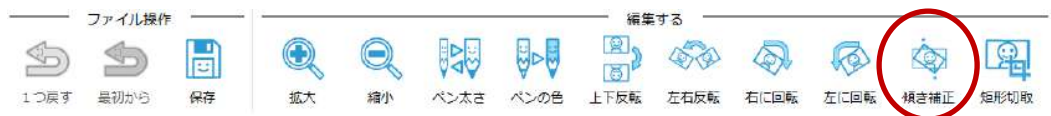


傾き補正ボタンを押すとアイコンがオレンジ色に変わります。



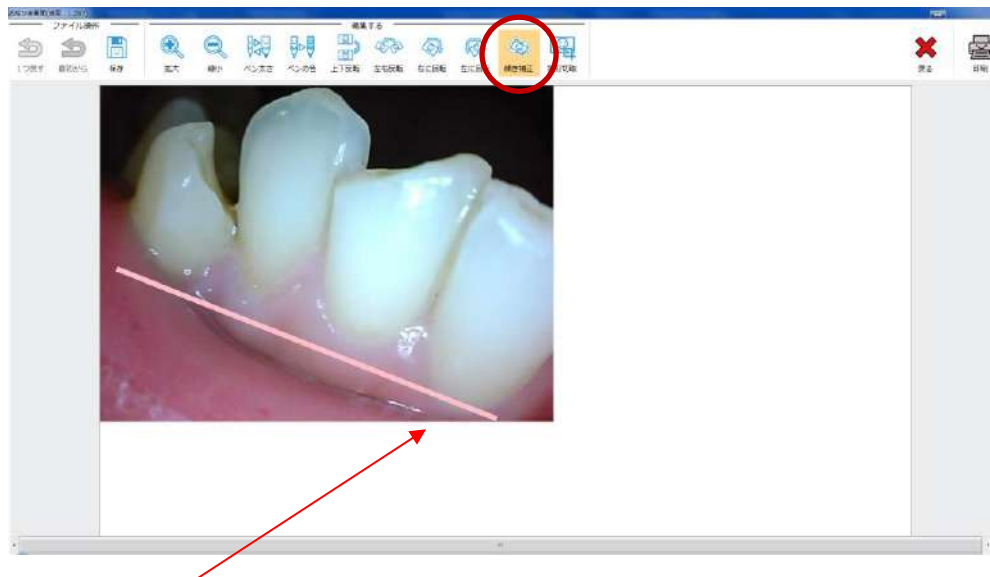

その状態で水平にしたい位置で線を引きます。

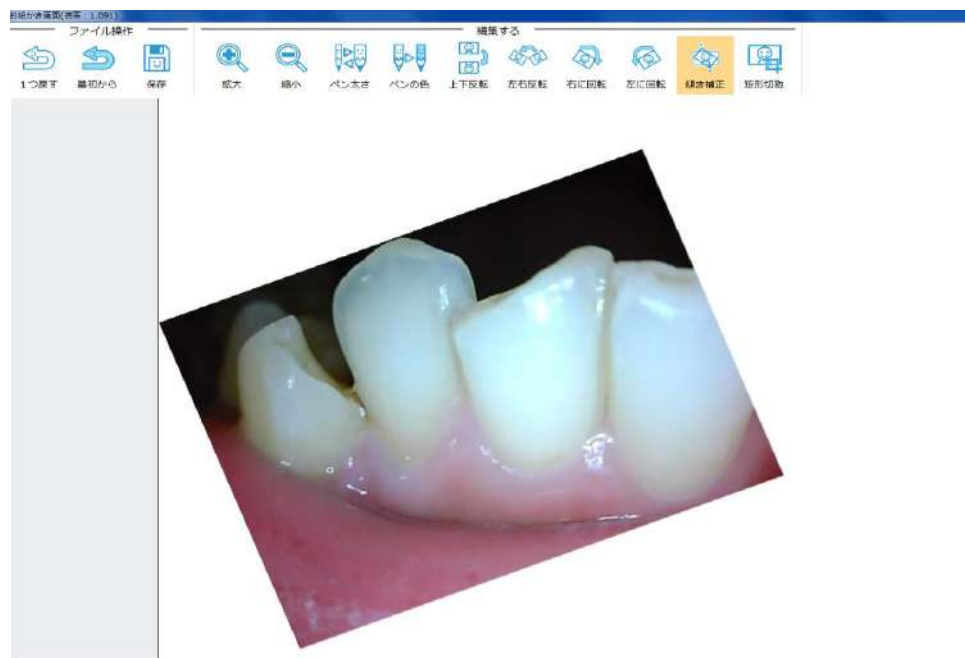



角度が変わり必要であれば保存ボタンを押します。

14. 16「短形切取」で画像の一部をトリミングします。



短形切取ボタンを押すとアイコンがオレンジ色に変わります。

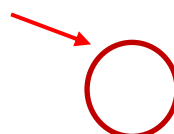

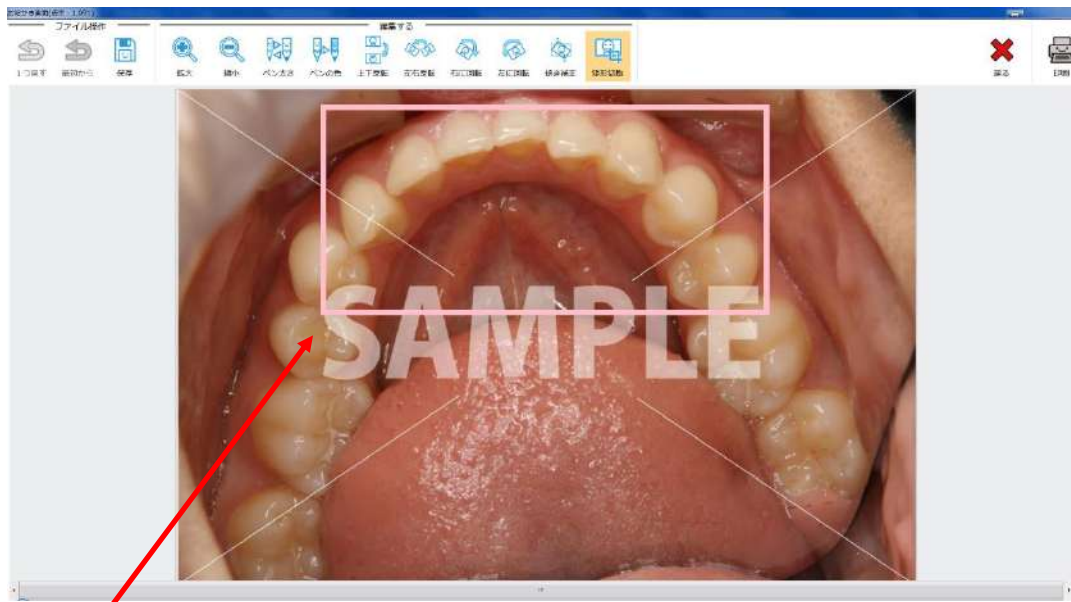


その状態で切り取りたい場所を選択します。




選択した場所が表示されますので必要であれば保存ボタンを押します。

15 動画を再生する


15.1 メインビューに再生されている動画をクリックしてメインビューに表示されている動画をクリックすると動画再生画面が表示されます。

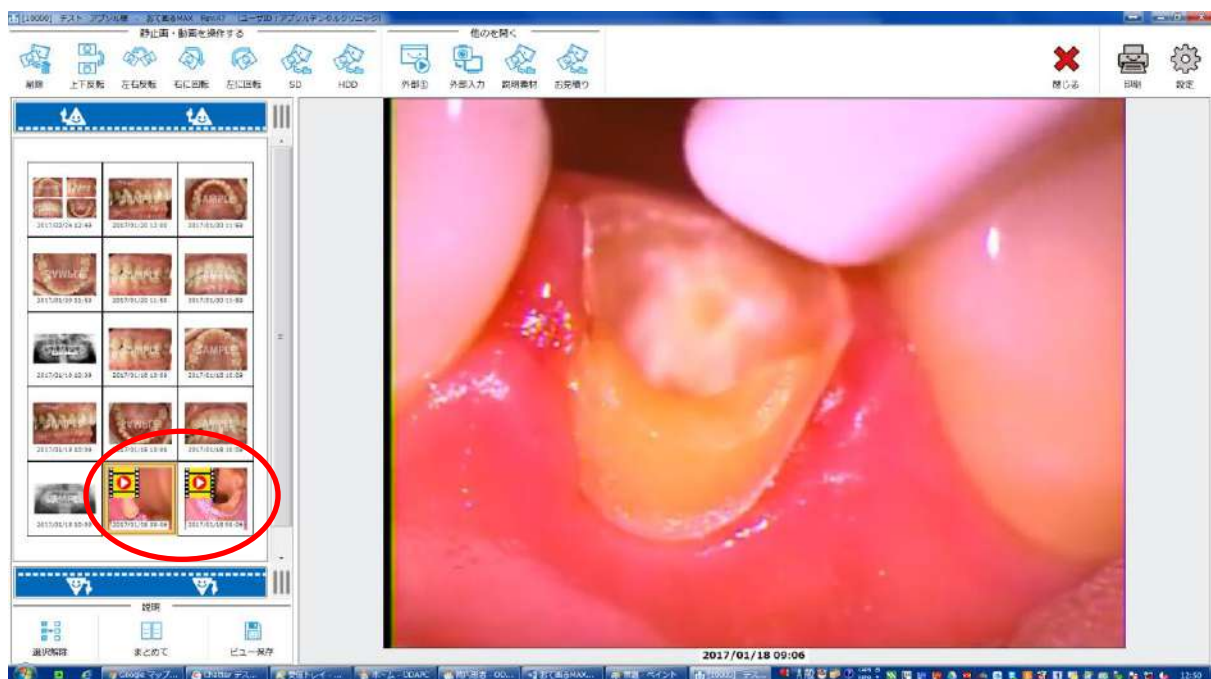


15.2 [一時停止]ボタンで動画が一時停止します。

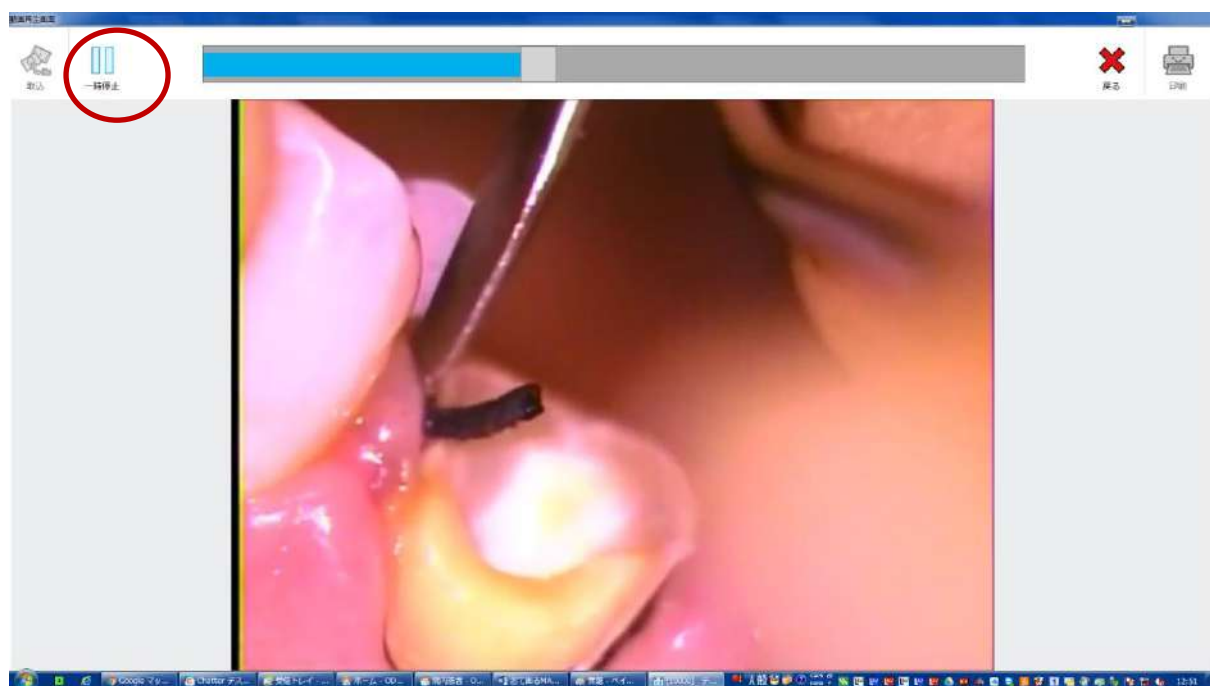


15.3 [再生]ボタンで動画が再生します。

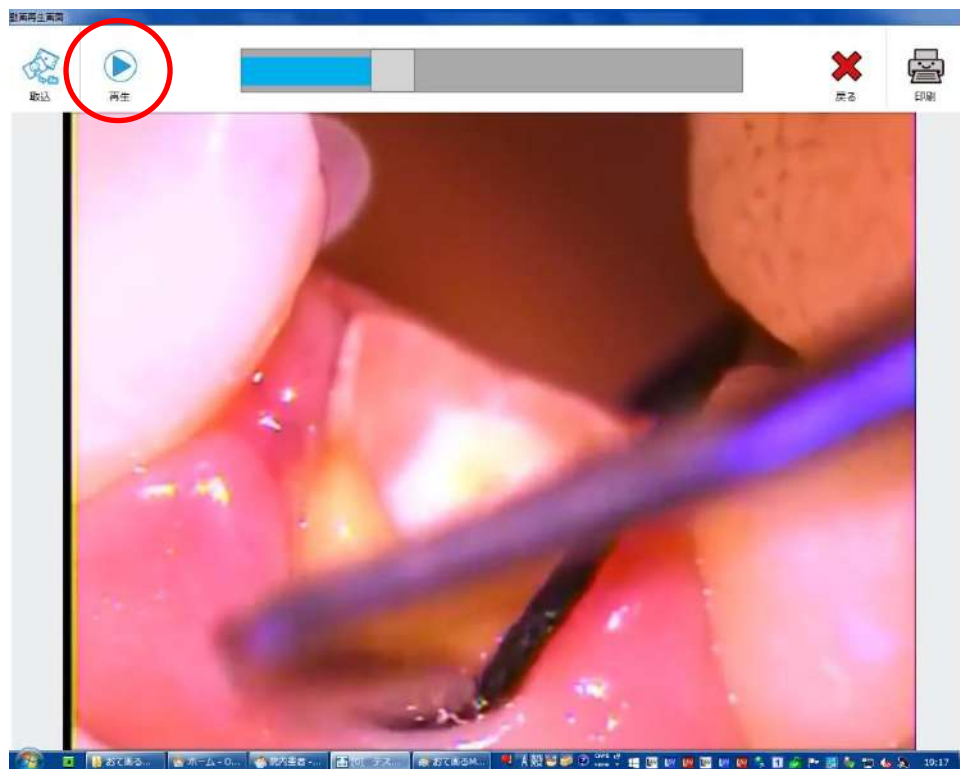

15.4 [取込]ボタンで、一時停止中の1コマを静止画として取り込みます。

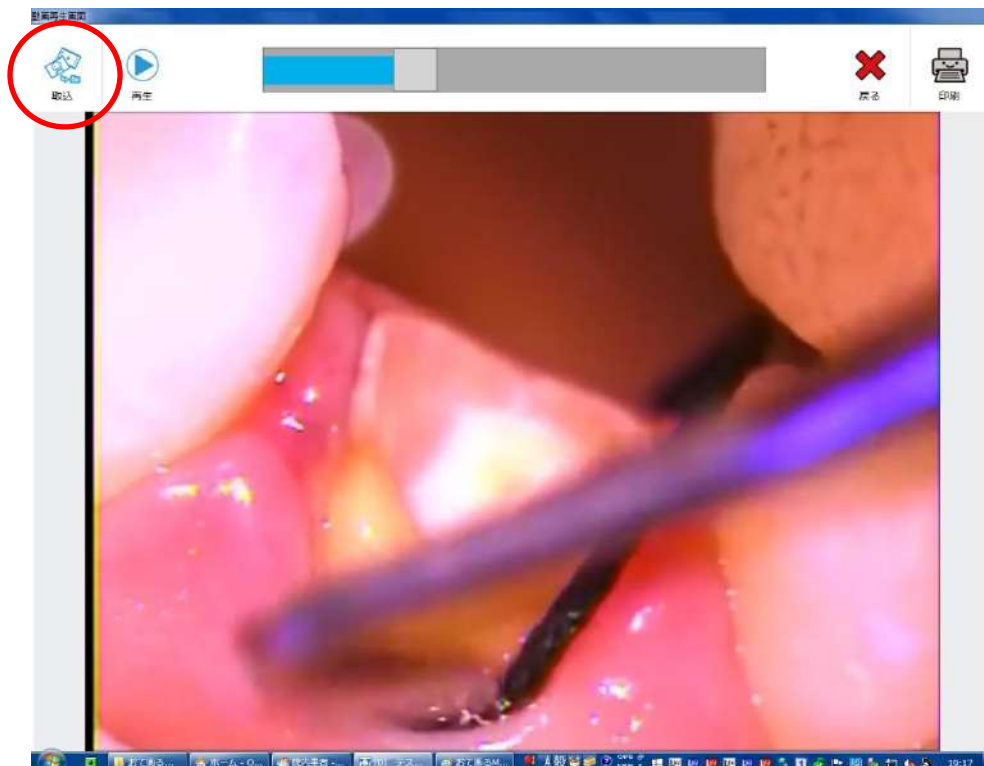


15.5 メーターをつまんで早送り、巻き戻しが出来ます。

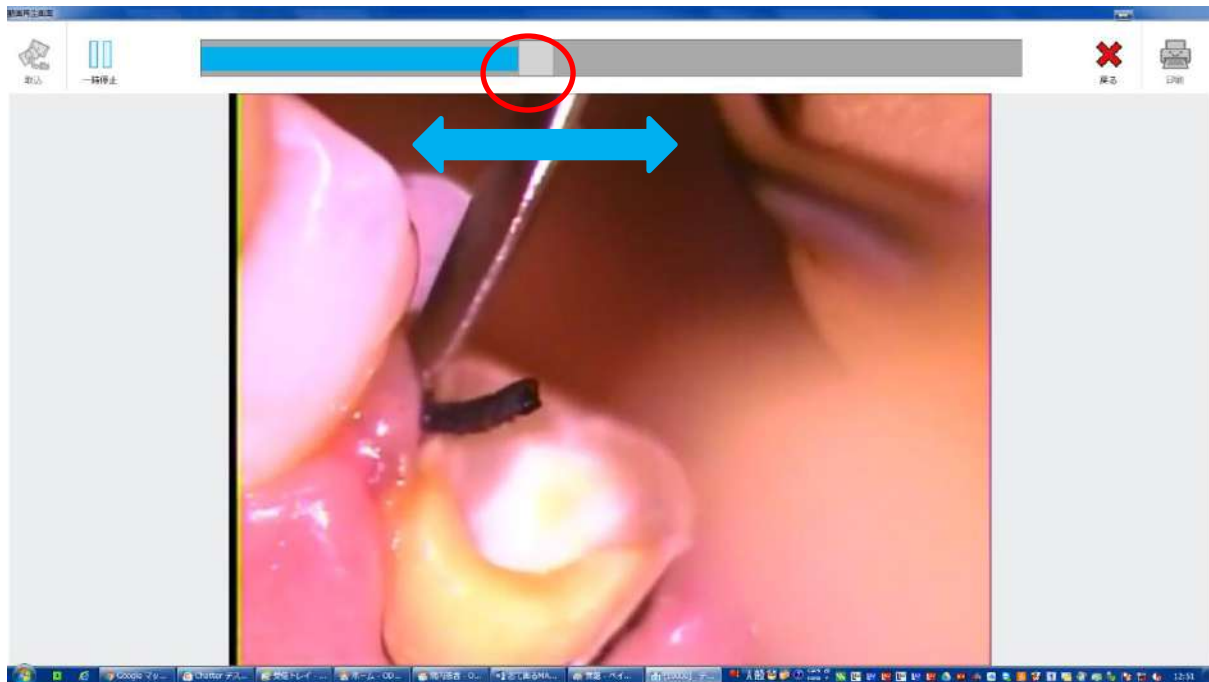


16 外部入力機器での撮影の場合

16.1 メイン画面の右上にある「外部入力」をクリックします。

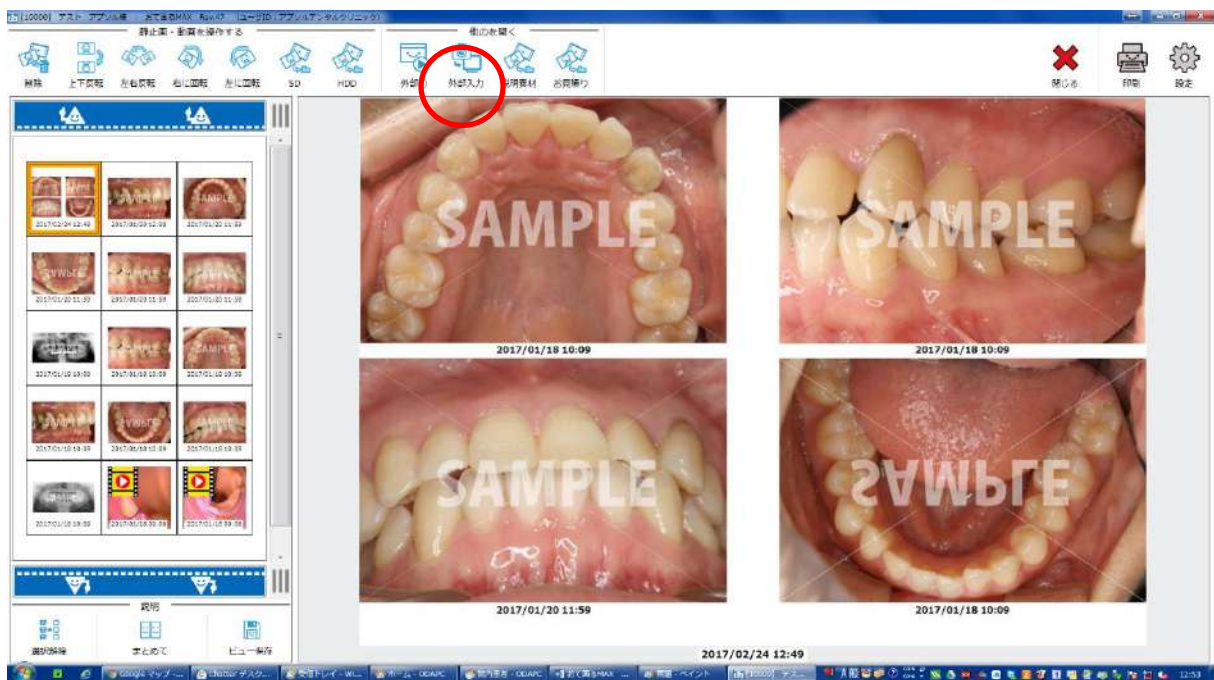

16.2 外部入力画面が表示されます。

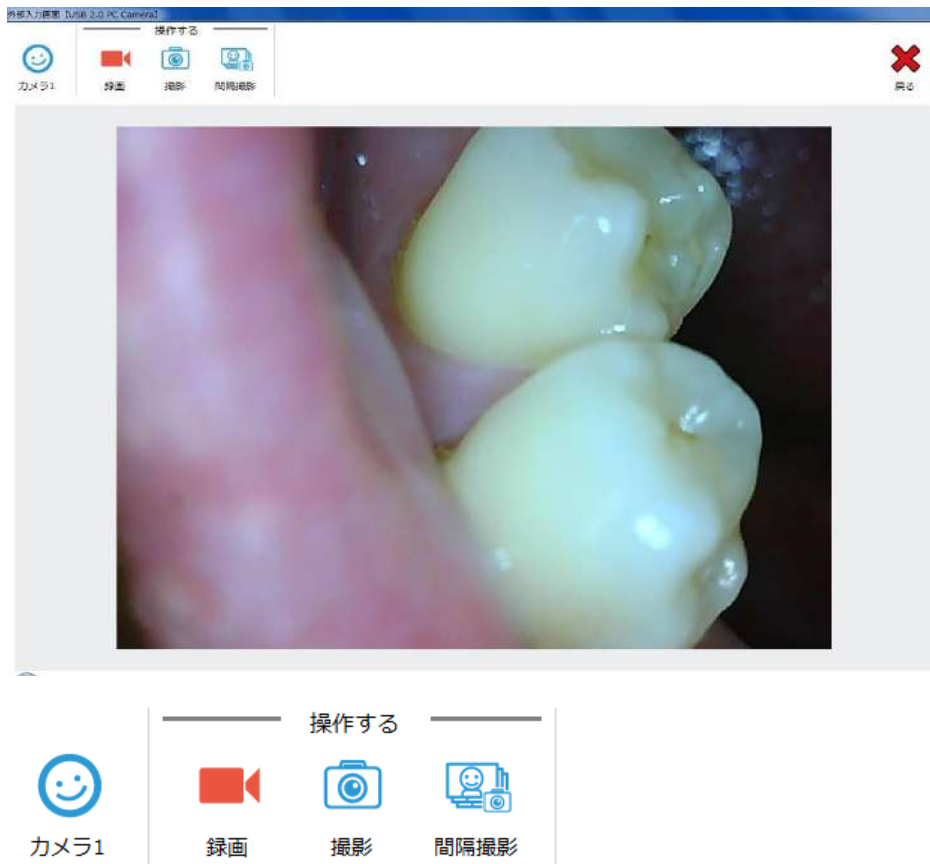

① カメラボタン

カメラが複数台接続されているとカメラアイコンが自動的に増え、カメラ1、カメラ2と表示されます。

使用したいカメラを選択してください。

② 録画アイコン

待機時間後に動画を撮影します。※1

③ 撮影ボタン

押したタイミングで写真を撮影します。

(マウスでの操作以外にもフットスイッチを繋げて踏むと撮影するような設定も可能です)

④ 間隔撮影ボタン

待機時間後に設定したタイミングで写真を自動的に取り込みます。※1

このボタンを押した後にピントを合わせていれば自動で写真撮影をするので写真がブレにくいです。


※1、待機時間、録画秒数、間隔撮影枚数などはメイン画面の設定から任意に設定可能です。

たくさん撮影してたくさん説明しましょう！

使い方は至ってシンプルです！

17 患者さんへの説明資料を案内する場合

17.1 メイン画面の右上にある「説明素材」をクリックします。

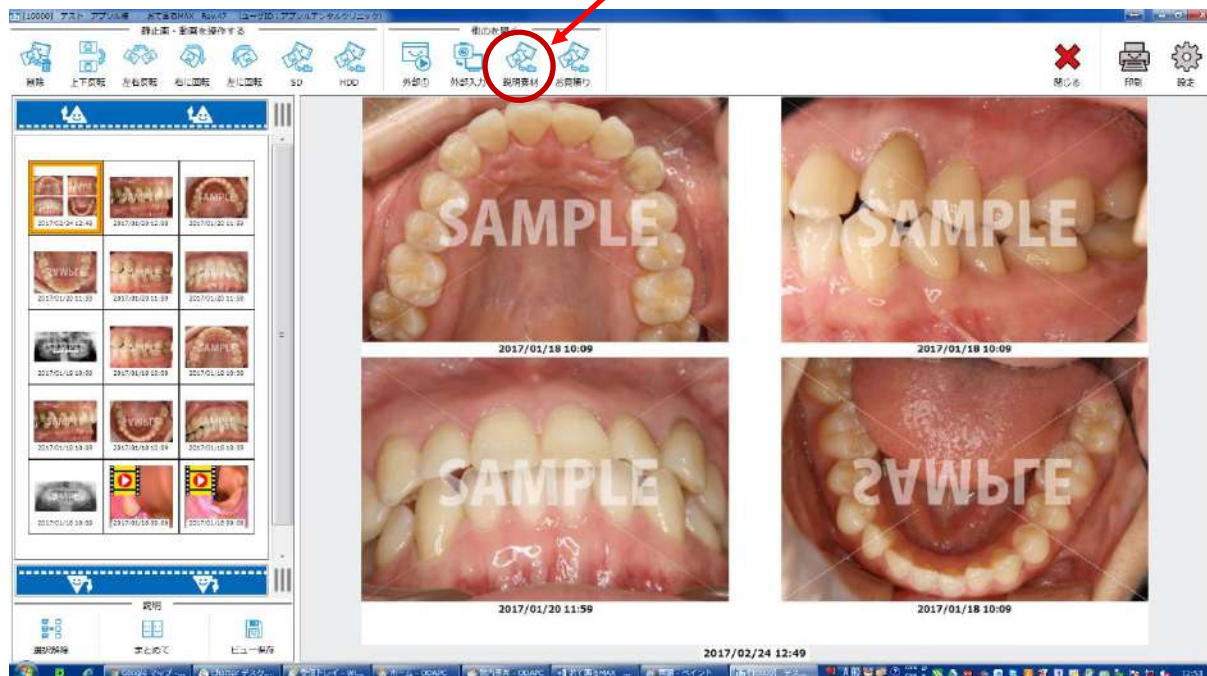

17.2 説明素材があるフォルダを指定するとサムネイルが表示されます。



17.3 説明したい画像を選びます。



17.4 選択した画像のお絵かき画面が表示されます。




このまま画面だけ表示させて戻って頂いたり、お絵かきで書き込んだ画像を「保存」ボタンで患者さんのデータに追加することが出来ます。

※説明資料が動画の場合は再生画面が表示されます。

終わりましたら戻るボタンを押します。

18 患者さんへのお見積もりを作成する場合

18.1 「お見積り」ボタンをクリックします。

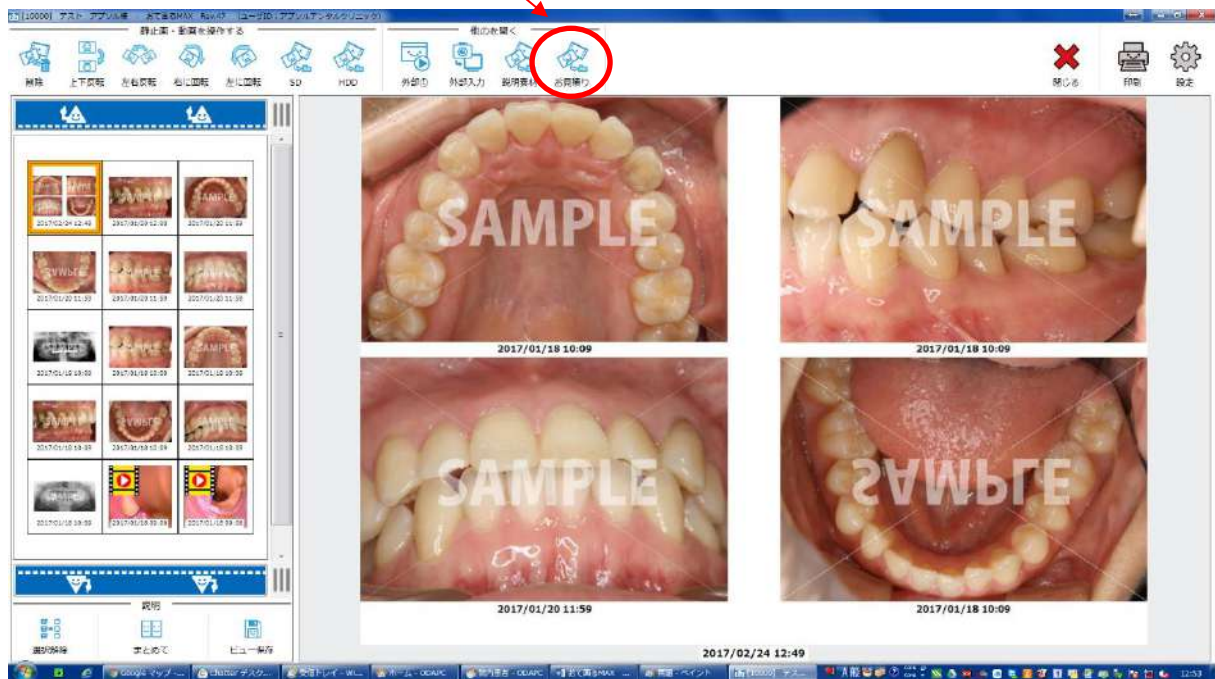

18.2 見積書画面が出てきますので赤枠の部分をクリックします。

発行日 2017年03月29日

見積書

【1】 アブソル 様

下記の通りお見積り申し上げます。

合計 ￥0-

内訳	数量	単価	金額
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
小計			0

18.3 部位を選択します。




①

			E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
54															
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
			E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			

②

選択しましたら右上の「OK」をクリックします。

18.4 部位の選択が終わったら次に自費項目の選択を行います。

発行日 2017年03月29日

見積書

【1】 アプソル 様


下記の通りお見積り申し上げます。

合計 ￥0-

内訳	数量	単価	金額
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
小計			0


赤枠の中をクリックします。

18.5 設定しているフォルダを開きます。※あらかじめ項目を作成しておく必要があります。

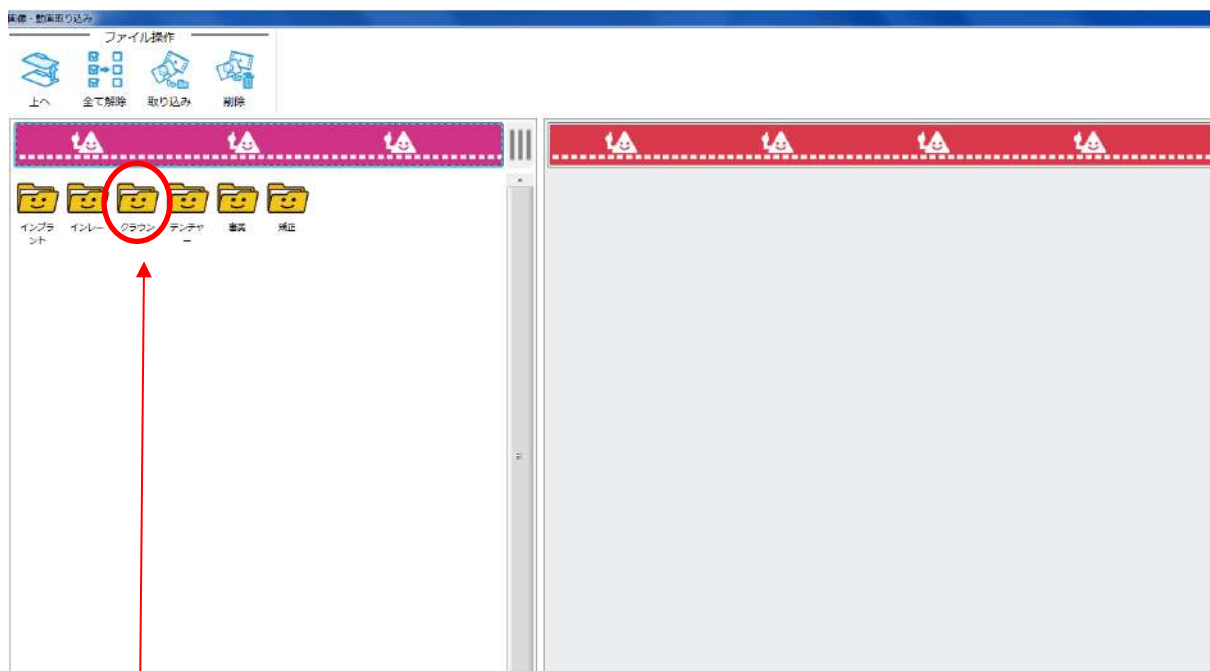

今回はクラウンをダブルクリックします。

18.6 算定したい項目をクリックし、取り込みボタンをクリックします。

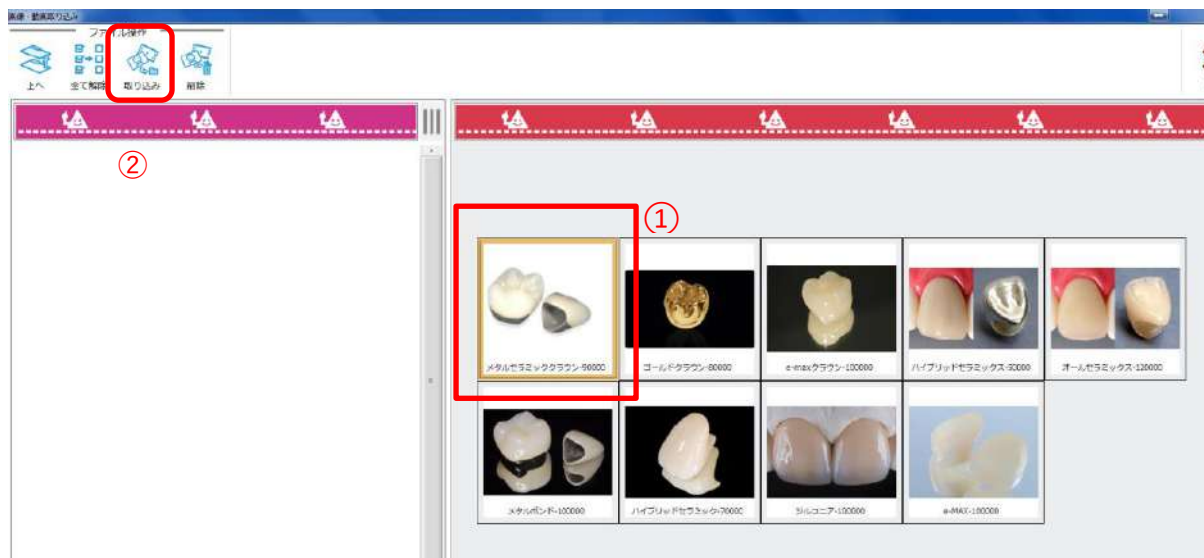

18.7 入力が終わりました。

発行日 2017年03月29日

見積書

【1】 アブソル 様

下記の通りお見積り申し上げます。

合計 ￥97,200-

内訳		数量	単価	金額	
1 メタルセラミッククラウン					
54		1	90,000	90,000	×
2					
		0	0	0	×
3					
		0	0	0	×
4					
		0	0	0	×

18.8 数量の上下ボタンで算定数を変更します。

1 **メタルセラミッククラウン**

54	



2

▲

▼

90,000

180,000

×

18.9 取り消したい場合は右にある×ボタンをクリックします。

1 メタルセラミッククラウン			2 ▲ ▼	90,000	180,000	✕
54						

18.10 また画面左下の顔マークに好きな画像やロゴを挿入することも出来ます。

※何も選択しない場合は空白で印刷されます。

			0  0 	0	0	
4			0  0 	0	0	
5			0  0 	0	0	

	小計	180,000
	消費税	14,400

上記金額には、保険診療負担金は含まれておりません。
別途ご負担頂きます。
やむをえない事情により予定が変更になった場合には、
治療費が変更となる場合がございます。

18.11 右下の注意事項の文章はメインビューの設定画面から好きな文章を表示出来ます。

※何も設定されていない場合空白で表示されます。

※文章は4行までとなります。

※見積書の画像はファイル名を「項目名-金額.jpg」のように作成して頂く形になります。

以上